


ActivePure®

GUARDIAN PRO

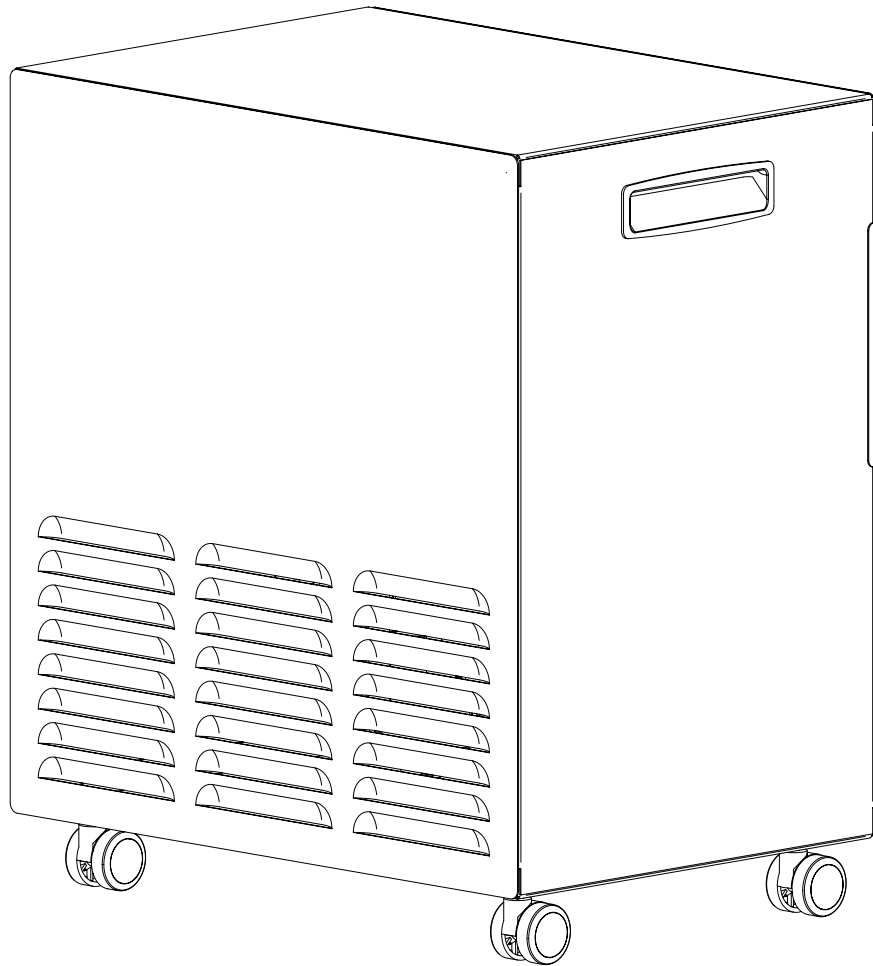

READ MANUAL CAREFULLY FOR PROPER USE AND OPERATION.

GENERAL INFORMATION

PRODUCT OVERVIEW

Your new ActivePure® Guardian Pro is designed to provide years of trouble-free, low maintenance operation. Be sure to read and follow all service procedures outlined in this owner's manual, and use only genuine ActivePure replacement parts.

CONTENTS

Product Overview	2
Specifications	2
Storage and Disposal	2
Important Safety Instructions	3
For Canadian Customers Only	4
Product Features	5
Operation	6
Replacement Parts & Service	9
Warranty Information	10
FCC Declaration & Responsible Party	11

STORAGE AND DISPOSAL

Do not dispose of this product as household waste. Electrical waste and electronic products should be appropriately recycled as required by practices established by your local authority.



SPECIFICATIONS

ActivePure Guardian Pro

- Model number: F203E
- Sales number: 00769

Technology:

- ActivePure® — (4) Cells

Electrical:

- Input Voltage: 120 V; 60 Hz
- Power Consumption: 216 W
- Complies to UL 507

Mechanical:

- Fuse: 2.5 A slowblow
- Airflow Rate: 300 CFM

Sound Level:

- 69 dB(A)

Weight & Dimensions:

- 27 lbs (12.25 kg)
- 13" W x 21.5" H x 18.5" D (33.02 cm x 54.61 cm x 46.99 cm)

Recommended Maximum Coverage in a Contiguous Space¹:

- Every facility is unique and proper configuration is an important as the technology. To validate coverage in your facility, speak to your sales representative or call customer service at 800-572-1446.

Warranty:

- Limited Three (3) Year Warranty

ActivePure Manufacturing, LLC reserves the right to change or modify any specification without notice.

If you have any questions concerning this, or any ActivePure product, contact ActivePure Customer Service at 800.572.1446 or email customerservice@ActivePure.com.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



CAUTION

- Risk of property damage, injury or death
- Any service must be performed by a qualified technician
- Risk of Sharp Edges Hazard
- Equipment sharp edges can cause injuries; avoid grasping equipment edges without protective gloves



WARNING

- Electrical Shock Hazard
- Can cause injury or death
- Disconnect all electrical power supplies before servicing
- When using an electrical appliance, basic precautions should always be taken
- To reduce risk of fire, electrical shock, or injury to persons, observe the following:

Read this manual in its entirety before using your ActivePure® Guardian Pro.

Keep out of the reach of children.

- Use only as described in this manual
- **DO NOT** use outdoors or on wet surfaces
- **DO NOT** allow to be used as a toy; Keep out of reach from children; close attention is necessary if operated near children
- **DO NOT** use with damaged cord or plug. If unit is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, **DO NOT** use, and return it to a service center
- **DO NOT** pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Keep cord away from heated surfaces
- **DO NOT** unit to sit on cord
- **DO NOT** unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord
- **DO NOT** handle plug or unit with wet hands
- **DO NOT** allow foreign objects to enter the ventilation or exhaust openings
- Turn off all controls before unplugging
- To avoid electric shock and fire hazards, plug directly into an appropriate electrical outlet (see voltage on unit); Never use with an extension cord or power strip
- To reduce the risk of electrical shock, this unit has a grounded plug (with a third prong); This plug will fit in a grounded outlet only one way. If it does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. **DO NOT** change the plug in any way. **DO NOT** use adapters

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FOR CANADIAN CUSTOMERS ONLY

ACTIVEPURE® GUARDIAN PRO

Sales No. : 00769

This UV device helps reduce the spread of viruses in the air.

Keep out of the reach of children.

Please read the label and owner's manual before using: www.activepure.com/manuals

PRECAUTIONS:

WARNING: UV radiation emitted from this device. Unintended use of the device, or damage to the housing, may result in exposure to ultraviolet radiation. Ultraviolet radiation may cause eye and skin irritation. Avoid exposing eyes and skin to ultraviolet radiation.

FIRST AID INSTRUCTIONS: Please contact your healthcare provider in the event of injury caused by this device.

DIRECTIONS FOR USE:

Place the unit in the center of the area to be treated for best results. Plug the cord into a working electrical outlet and rotate the knob to the right to operate the unit. Please see owner's manual for detailed instructions on using, handling, storing and disposing of the device, and procedures to mitigate any associated risks.

The use of this device is a supplement to and not a substitute for standard infection control practices; users must continue to follow all current infection control practices, including those related to the cleaning and disinfection of environmental surfaces.

FOR INQUIRIES CONTACT:


AERUS CANADA, INC.
Laird Business Park
3480 Laird Road, Units 2-5
Mississauga, Ontario, Canada, L5L 5Y4

W. Parrell, Manager
(905) 569-9399
wparrell@aerusonline.com

Aerus Canada, Inc. is affiliated with ActivePure Manufacturing, LLC
1300 Valley Drive, Bristol, VA 24201

PRODUCT FEATURES


It is important to be familiar with the parts of the ActivePure® Guardian Pro. If any parts are missing, contact your sales representative or ActivePure Customer Service.

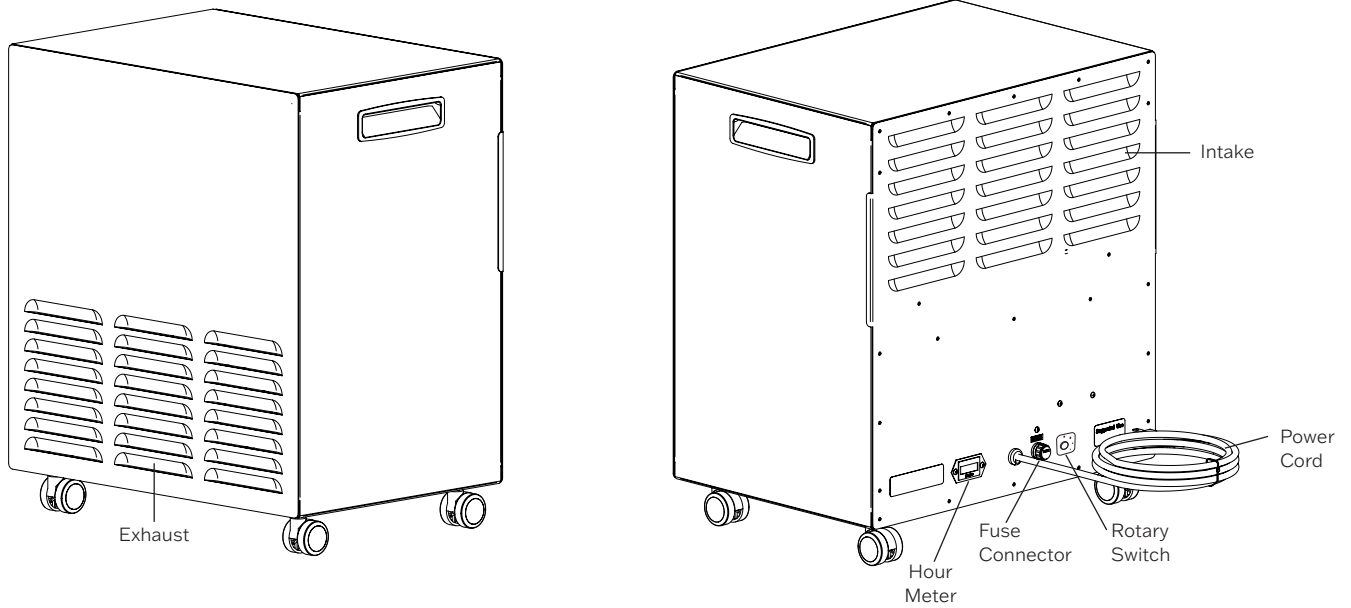

OPERATION

The ActivePure Guardian Pro is only to be serviced by an authorized technician. This is a device intended for the reduction of viruses, bacteria, and other contaminants in large indoor spaces.

1. Take your ActivePure Guardian Pro unit out of the shipping carton and remove all protective materials.
2. Place the unit in the center of the area to be treated for best results.
3. Plug the cord into a working electrical outlet and rotate the knob to the right to operate the unit.
4. Rotate knob to the high position first to power on the unit. Once the fan is moving at full speed, turn the knob to the desired speed.
5. When finished, rotate knob to the off position and unplug the unit.

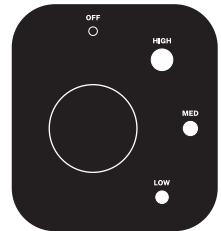

NOTE: Periodic vacuuming of the filter screen may be required.

REPLACEMENT PARTS & SERVICE

REPLACEMENT PARTS (QTY)	PART NUMBER
ActivePure® Cell	49945

To order replacement parts, contact your sales representative or ActivePure Customer Service for further assistance at 800.572.1446 or email customerservice@ActivePure.com.

WARRANTY INFORMATION

Limited Three (3) Year Warranty

To register your ActivePure® Guardian Pro unit, visit www.activepure.com/warranty.

Customer should not repackage and ship the ActivePure Guardian Pro unit due to possibility of irreparable damage.

WHAT IS COVERED BY THIS WARRANTY

We warrant the ActivePure Guardian Pro to the consumer, subject to the conditions below, against defects in workmanship or material, provided that the products are returned to a service location within the following time periods:

- ActivePure Guardian Pro within three (3) years from date of purchase
- ActivePure Cell within one (1) year from date of purchase

INSTALLATION AND MAINTENANCE REQUIREMENTS

Failure to use and maintain your ActivePure Guardian Pro in accordance with your Owner's Manual will void this warranty. Servicing the ActivePure Guardian Pro by parties other than our authorized representatives and/or using parts other than genuine ActivePure parts will also void this warranty.

- Replacing the ActivePure Cell every one (1) year with a genuine ActivePure part (proof of change may be required)

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE

Customers must contact their sales representative or ActivePure Customer Service and provide proof of purchase within the above time periods. We will repair or replace and return the product, without charge and within a reasonable period of time, subject to the conditions in the above paragraphs, if its examination shall disclose any part to be defective in workmanship or material. If we, in our discretion, are unable to repair the product after a reasonable number of attempts, we will provide either a refund of the purchase price or a replacement unit, at the company's option.

WHAT IS NOT COVERED BY THIS WARRANTY

This product is intended for household and commercial use. Ordinary wear and tear shall not be considered a defect in workmanship or material. These warranties do not apply for loss or damage caused by accident, fire, abuse, misuse, modification, or misapplication.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, AND TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAWS, ACTIVEPURE MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND. ALL OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, ARE HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

UNAUTHORIZED CHANNELS & MISSING SERIAL NUMBERS

If a valid serial number is missing from the product, the warranty will be voided. Warranties are voided if a product is purchased through unauthorized channels, this includes websites that are not authorized to sell our products OR to

6

use ActivePure trademarked names, images and logos as well as Internet auction sites (e.g. ebay and Craigslist). The only approved Internet presence for ActivePure products is www.activepure.com or www.activepuremedical.com. To confirm warranty coverage prior to purchasing a product, contact ActivePure Customer Service at 800.572.1446 with the serial number located on the back of the unit.

LIMITATION OF LIABILITY FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES

TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAWS, ACTIVEPURE SHALL NOT IN ANY CASE BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING FROM BREACH OF EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, CONDITIONS, GUARANTEES OR REPRESENTATIONS, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR ANY OTHER LEGAL THEORY. Such excluded damages include, but are not limited to, loss of profits or revenue and loss of the use of the products.

FOR U.S. APPLICATION ONLY

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow limitations on warranties, or on remedies for breach. In such states, the above limitations may not apply to you.

FOR CANADIAN APPLICATION ONLY

Exclusion of Subsequent Owners: Except as otherwise required by applicable legislation, this warranty is not transferable. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from province to province. Some provinces and territories do not allow limitations on warranties, or on remedies for breach. In such provinces or territories, the above limitations may not apply to you. If any provision of this warranty or part thereof is held by a court of competent jurisdiction to be invalid, illegal or unenforceable, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions or parts thereof will not in any way be affected or impaired within the jurisdiction of that court. This entire warranty shall continue to be valid, legal and enforceable in any jurisdiction where a similar determination has not been made.

This warranty is provided by:
ActivePure Manufacturing, LLC
1300 Valley Drive
Bristol, VA 24201

SERVICE

Every effort is made to ensure customers receive an up-to-date instructions manual on the use of our products; however, from time to time, modifications to our products may without notice make the information contained herein subject to alteration. For the latest information, please visit our website at www.activepure.com or www.activepure.com/manuals.

FCC DECLARATION & RESPONSIBLE PARTY

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant of part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the Independent Contractor for help.

FCC Declaration of Conformity

Name: ActivePure® Guardian Pro

Model: F203E

Produced by: ActivePure Manufacturing, LLC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.


Responsible Party

ActivePure Manufacturing, LLC

1300 Valley Drive

Bristol, VA 24201

Ph: 800.572.1446

Signature: 

Printed Name: Andrew Eide

Title: Vice President of Product Development
and Manufacturing

Date: 01/11/22




For information regarding the use of this product, please call Customer Service.

1.800.572.1446 or email at customerservice@ActivePure.com

www.activepure.com

ActivePure®

GUARDIAN PRO

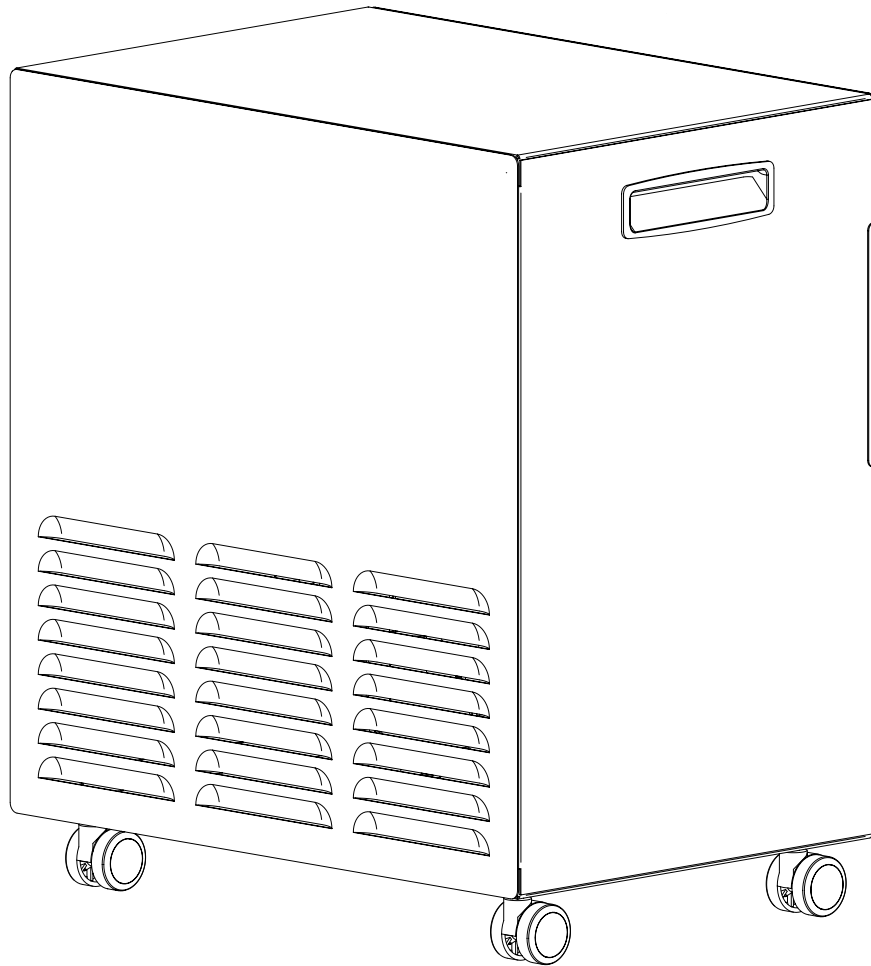

**LIRE LE MANUEL ATTENTIVEMENT POUR CONNAITRE LES
PROCÉDURES ET LE FONCTIONNEMENT APPROPRIÉS.**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DESCRIPTION DU PRODUIT

Votre nouvel ActivePure® Guardian Pro est conçu pour offrir des années de fonctionnement sans soucis, avec peu d'entretien. Veuillez vous assurer de lire et de suivre toutes les procédures d'entretien décrites dans ce manuel d'utilisation, et de n'installer que les pièces de rechange d'origine ActivePure.

TABLE DES MATIÈRES

Description du produit	10
Spécifications	10
Stockage et mise au rebut	10
Consignes de sécurité importantes	11
Pour les clients au Canada seulement	12
Caractéristiques du produit	13
Utilisation	13
Pièces de rechange et service	13
Informations relatives à la garantie	14
Déclaration FCC et Partie responsable	15

STOCKAGE ET MISE AU REBUT

Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères. Les déchets électriques et produits électroniques doivent être recyclés convenablement, conformément aux pratiques établies par vos autorités locales.



SPÉCIFICATIONS

ActivePure Guardian Pro

- Numéro de modèle: F203E
- Numéro de série: 00769

Technologie:

- 4 cellules ActivePure®

Électrique:

- Tension d'alimentation : 120 V; 60 Hz
- Consommation d'électricité : 216 W
- Conforme à la norme UL 507

Mécanique:

- Fusible : souffleuse 25 A
- Débit nominal : 300 pi³

Niveau acoustique:

- 69 dB(A)

Poids et Dimensions:

- 27 lbs (12,25 kg)
- L 13 x H 21,5 x P 18,5 po
(33,02 cm x 54,61 cm x 46,99 cm)

Couverture maximale recommandée dans un espace étroit¹:

- Chaque lieu est unique et une bonne configuration est aussi importante que la technologie. Pour approuver la couverture dans votre bâtiment, consultez votre représentant commercial ou contactez le service à la clientèle au 1.800.572.1446.

Garantie:

- Garantie limitée trois (3) ans

ActivePure Manufacturing, LLC se réserve le droit de modifier des spécifications sans préavis.

Si vous avez la moindre question concernant ce produit ActivePure, ou tout autre produit, veuillez contacter le service à la clientèle d'ActivePure au 1.800.572.1446 ou par courriel à customerservice@ActivePure.com.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



ATTENTION

- Risque de dommages matériels, de blessures ou de décès
- Tout entretien de cet appareil doit être effectué par un technicien qualifié
- Risque de danger en raison des bords tranchants
- Les bords tranchants de l'appareil peuvent provoquer des blessures; éviter d'agripper les bords de l'appareil sans gants de protection



MISE EN GARDE

- Danger de décharge électrique
- Peut causer des blessures ou la mort
- Débrancher toutes les alimentations électriques avant de faire l'entretien
- L'utilisation d'appareils électriques nécessite des précautions de base qu'il faut toujours prendre
- Pour réduire les risques d'incendie, de décharge électrique ou de blessure corporelle, veuillez respecter les procédures suivantes:

Lire ce manuel dans sa totalité avec d'utiliser votre ActivePure® Guardian Pro.

Garder hors de la portée des enfants.

- N'utiliser l'appareil que de la façon prescrite dans ce manuel
- **NE JAMAIS** utiliser l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces humides
- **NE JAMAIS** utiliser cet appareil comme un jouet; garder hors de la portée des enfants; faire preuve d'une attention particulière lorsqu'utilisé à proximité d'enfants
- **NE PAS** utiliser avec un cordon ou une fiche endommagés; si l'appareil ne fonctionne pas comme il se doit, a subi une chute, a été endommagé ou laissé à l'extérieur, ou est tombé dans l'eau, **NE PAS** l'utiliser et retourner l'appareil à un centre de service
- **NE PAS** tirer ou transporter l'appareil par le cordon, utiliser le cordon comme poignée, fermer la porte sur le cordon, ou tirer le cordon contre des bords ou des coins tranchants; tenir le cordon éloigné des surfaces chaudes
- **NE PAS** placer l'appareil sur le cordon
- **NE PAS** débrancher en tirant sur le cordon; pour débrancher l'appareil, saisir la fiche pour la retirer, et non le cordon
- **NE PAS** manipuler l'appareil ou la fiche avec des mains humides
- **NE PAS** laisser des objets étrangers entrer dans les ouvertures de ventilation ou d'échappement
- Tout arrêter avant de débrancher
- Afin d'éviter les décharges électriques ou les risques d'incendie, brancher l'appareil directement dans une prise électrique appropriée (voir le voltage indiqué sur l'unité); ne jamais utiliser avec une rallonge ou une multiprise
- Afin de réduire les risques de décharge électrique, cet appareil est doté d'une fiche mise à la terre (avec une troisième broche); cette fiche ne s'insère dans une prise mise à la terre que dans un seul sens; si elle ne rentre pas, contactez un électricien qualifié pour installer la prise appropriée; ne changer en aucun cas la fiche; **NE PAS** utiliser d'adaptateur

CONSERVER CES CONSIGNES

POUR LES CLIENTS AU CANADA SEULEMENT

ACTIVEPURE® GUARDIAN PRO

Numéro de série : 00769

Ce modèle à rayons UV permet de réduire la propagation des virus dans l'air.

Garder hors de la portée des enfants.

Veillez lire l'étiquette ou le manuel d'utilisation avant de l'utiliser : www.activepure.com/manuals

PRÉCAUTIONS:

MISE EN GARDE: Cet appareil émet des rayonnements UV. L'utilisation involontaire de cet appareil ou un boîtier endommagé peuvent entraîner l'exposition à des rayons ultraviolets. Les rayonnements ultraviolets peuvent irriter les yeux et la peau. Évitez d'exposer vos yeux et votre peau aux rayons ultraviolets.

INSTRUCTIONS POUR LES PREMIERS SOINS: Veuillez contacter votre professionnel de la santé en cas de blessure causée par cet appareil.

MODE D'EMPLOI:

Placer l'appareil au milieu de la zone à traiter pour de meilleurs résultats. Brancher le cordon dans une prise électrique fonctionnelle et tourner le bouton vers la droite pour allumer l'appareil. Veuillez consulter le manuel d'utilisation pour des instructions détaillées sur l'utilisation, la manipulation, le stockage et la mise au rebut de l'appareil, ainsi que les procédures pour réduire tout risque associé.

L'utilisation de cet appareil agit en complément des pratiques standards de contrôle des infections et ne représente donc pas un moyen de substitution à celles-ci. Les utilisateurs doivent continuer à suivre toutes les pratiques standards actuelles en matière de contrôle des infections, y compris celles concernant le nettoyage et la désinfection des surfaces environnantes.

POUR TOUTE QUESTION, VEUILLEZ CONTACTER:


AERUS CANADA, INC.
Laird Business Park
3480 Laird Road, Unités 2-5
Mississauga, Ontario, Canada, L5L 5Y4

W. Parrell, Gestionnaire
(905) 569-9399
wparrell@aerusonline.com

Aerus Canada, Inc. est affilié à ActivePure Manufacturing, LLC
1300 Valley Drive, Bristol, VA 24201

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Il est important de se familiariser avec les pièces de l'appareil ActivePure® Guardian Pro. Si des pièces sont manquantes, contactez votre représentant commercial ou le service à la clientèle ActivePure.

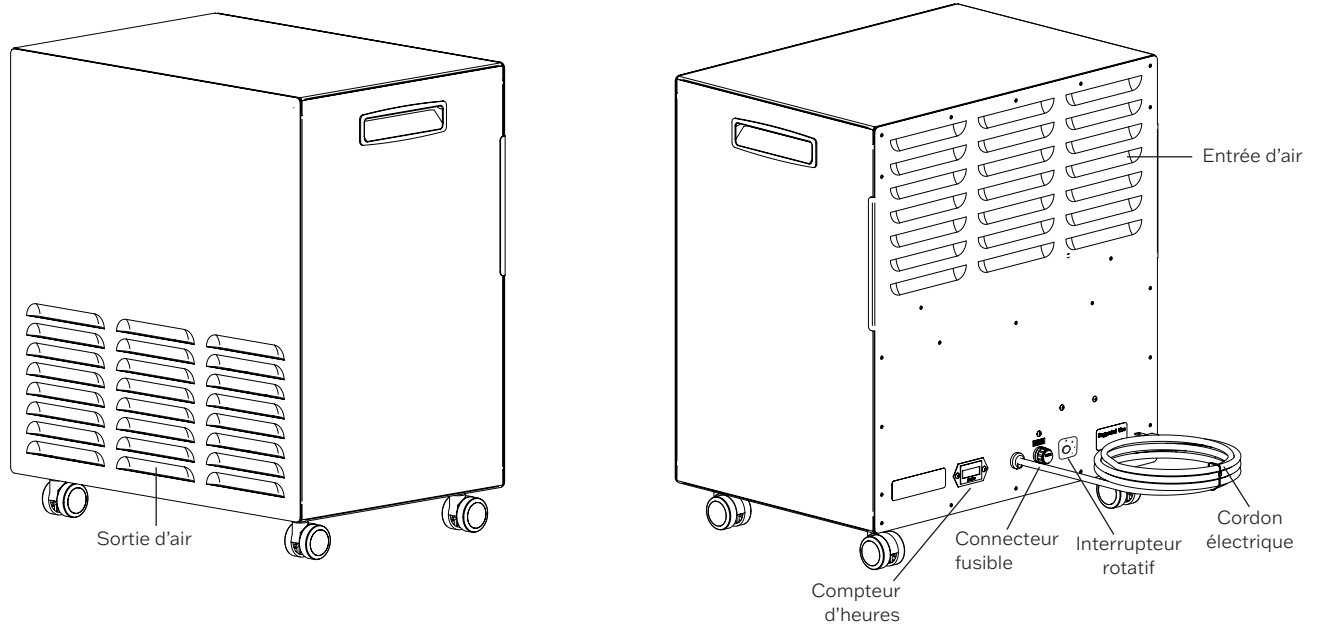

UTILISATION

L'ActivePure Guardian Pro peut uniquement être réparé par un technicien autorisé. Cet appareil est conçu pour réduire les virus, bactéries et autres impuretés dans de grands espaces fermés.

1. Sortir l'appareil ActivePure® Guardian Pro de son emballage de transport et retirer toutes les protections.
2. Placer l'appareil au milieu de la zone à traiter pour de meilleurs résultats.
3. Brancher le cordon dans une prise électrique fonctionnelle et tourner l'interrupteur vers la droite pour mettre l'appareil en marche.
4. Tourner l'interrupteur sur la position élevée en premier pour faire fonctionner l'appareil. Une fois que le ventilateur fonctionne à pleine vitesse, tourner l'interrupteur sur la vitesse désirée.
5. Une fois terminé, tourner l'interrupteur sur la position « éteinte » et débrancher l'appareil.

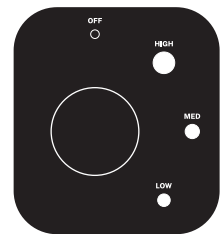

REMARQUE: Il peut être nécessaire d'aspirer la grille du filtre de façon périodique.

PIÈCES DE RECHANGE ET SERVICE

PIÈCES DE RECHANGE (QTÉ)	NUMÉRO DE PIÈCE
Cellule ActivePure	49945

Pour commander des pièces de rechange, contacter un représentant ou le service à la clientèle ActivePure, au 1.800.572.1446, ou par courriel à l'adresse customerservice@ActivePure.com

INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE

Garantie limitée trois (3) ans

Pour enregistrer votre appareil ActivePure® Guardian Pro, rendez-vous sur www.activepure.com/warranty

Le client ne devrait pas réemballer et envoyer l'appareil ActivePure® Guardian Pro, car des dommages irréparables pourraient se produire

CE QUI EST COUVERT PAR LA GARANTIE

Nous garantissons l'appareil ActivePure® Guardian Pro au client, selon les conditions ci-dessous, contre toute défectuosité de fabrication ou de matériaux, à condition que les produits soient retournés dans un centre de services dans les délais indiqués:

- ActivePure® Guardian Pro dans les trois (3) ans suivant la date d'achat
- Cellule ActivePure dans l'année (1 an) suivant la date d'achat

CONDITIONS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

L'utilisation et l'entretien de l'ActivePure Guardian Pro autrement que ce qui est indiqué dans le manuel d'utilisation annuleront cette garantie. L'entretien de votre appareil ActivePure Guardian Pro par des parties autres que nos représentants autorisés et/ou l'utilisation de pièces autres que les pièces d'origine annuleront aussi cette garantie.

- Remplacement de la cellule ActivePure chaque année par une pièce d'origine ActivePure (une preuve du changement pourrait être exigée)

COMMENT OBTENIR LE SERVICE DE GARANTIE

Le client doit contacter son représentant commercial ou le service à la clientèle d'ActivePure et fournir une preuve d'achat dans le délai indiqué ci-dessus. Nous réparerons ou remplacerons, puis renverrons le produit sans aucuns frais supplémentaires et dans un délai raisonnable, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes ci-dessus, si l'examen révèle un défaut de fabrication ou de matériau d'une pièce. Si, à notre discrétion, nous ne sommes pas en mesure de réparer le produit après un nombre raisonnable de tentatives, nous en rembourserons le prix d'achat ou le remplacerons, au gré de la compagnie.

CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE

Ce produit est conçu pour un usage domestique et commercial. L'usure normale n'est pas considérée comme un défaut de matériau ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas pour les pertes ou dommages provoqués par un accident, un incendie, une utilisation abusive, une mauvaise utilisation, une modification ou une application inadaptée.

EXCLUSION D'AUTRES GARANTIES ET CONDITIONS

EXCEPTÉ POUR CE QUI EST CONVENU CI-APRÈS, ET DANS LA MESURE PERMISE PAR LES LOIS APPLICABLES, NOUS NE FORMULONS AUCUNE REPRÉSENTATION OU GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT. ACTIVEPURE DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER.

CANAUX NON AUTORISÉS ET NUMÉROS DE SÉRIE MANQUANTS

En cas d'absence de numéro de série sur le produit, la garantie sera annulée. Les garanties s'annulent si un produit est acheté via un canal non autorisé, comme un site Internet non autorisé à vendre nos produits OU l'utilisation des noms de marque, images ou logos ActivePure, ou encore un site de vente aux enchères (p. ex. : eBay ou Craigslist). Les produits ActivePure ne peuvent être présents sur Internet que sur le site www.activepure.com ou www.activepuremedical.com.

Pour confirmer la couverture de la garantie avant d'acheter un produit, contactez le service à la clientèle d'ActivePure au 1.800.572.1446 avec le numéro de série indiqué au dos de l'appareil.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS

DANS LA MESURE PERMISE PAR LES LOIS EN VIGUEUR, ACTIVEPURE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT DU NON-RESPECT DES GARANTIES, CONDITIONS OU REPRÉSENTATIONS EXPRESSES OU IMPLICITES, D'UNE VIOLATION DE CONTRAT, DE NÉGLIGENCE OU D'AUTRES THÉORIES JURIDIQUES. Ces dommages exclus comprennent, sans s'y limiter, la perte de profits ou de revenus, et la perte de jouissance du produit.

POUR LES ÉTATS-UNIS SEULEMENT

Cette garantie vous confère des droits juridiques précis qui peuvent être complétés par d'autres droits variant d'un État à l'autre. Certains États ne permettent pas de limiter les garanties ou les recours en cas de non-respect des clauses contractuelles. Dans ces États, les limitations ci-haut mentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous.

POUR LE CANADA SEULEMENT

Exclusion des propriétaires subséquents : Sauf disposition contraire dans les lois applicables, cette garantie n'est pas transférable. Cette garantie vous confère des droits juridiques précis qui peuvent être complétés par d'autres droits variant d'une province à l'autre. Certaines provinces et certains territoires ne permettent pas de limiter les garanties ou les recours en cas de non-respect. Dans ces provinces ou territoires, les dispositions limitatives ci-dessus peuvent être sans effet pour vous. Si l'une des clauses de cette garantie, partielle ou entière, est considérée par un tribunal compétent comme invalide, illégale ou inapplicable, la validité, la légalité et l'applicabilité des clauses restantes, partielles ou dans leur totalité, ne sera en aucun cas affectée ou modifiée par le tribunal compétent. La garantie entière continue d'être valide, légale et applicable dans toute juridiction ne s'étant pas prononcée de façon similaire.

Cette garantie est fournie par :
ActivePure Manufacturing, LLC
1300 Valley Drive
Bristol, VA 24201

SERVICE

Nous nous efforçons, dans toute la mesure du possible, de veiller à ce que nos clients reçoivent des manuels d'utilisation à jour; cependant, il se peut que nos produits subissent des modifications sans préavis, ce qui imposerait par la suite une modification des informations contenues dans ce manuel. Pour les renseignements les plus récents, veuillez visiter notre site Web sur www.activepure.com ou www.activepure.com/manuals

DÉCLARATION FCC ET PARTIE RESPONSABLE

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la section 15 des réglementations FCC. Ces limites sont établies afin d'apporter une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation en particulier. Si cet équipement cause des interférences dangereuses pour la radio ou la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit autre que celui où est branché le récepteur.
- Consulter l'entrepreneur indépendant pour obtenir de l'assistance.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA FCC

Nom: ActivePure® Guardian Pro

Modèle: F203E

Fabricant: ActivePure Manufacturing, LLC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC.


PARTIE RESPONSABLE

ActivePure Manufacturing, LLC

1300 Valley Drive

Bristol, VA, 24201

Tél: 1.800.572.1446

Signature: 

Nom en lettres moulées: Andrew Eide

Titre: Vice-président du développement et de la fabrication des produits

Date: 11/02/22



Pour de plus amples renseignements concernant l'utilisation de cet appareil,
veuillez contacter le service à la clientèle.

1.800.572.1446 ou écrire à customerservice@ActivePure.com

www.activepure.com